

GIOCO



Hybrid Pressure Relief

CE



Hybrid System



Gio-Form Hybrid-systemet er et dynamisk vekslende madrasudskiftningssystem, der kombinerer fordelene ved moderne skum-teknologi og traditionelle dynamiske luftmadrasser.

Modellen er for patienter, der anses for at være i "**meget høj risiko**" for at udvikle liggesår.

Dette "**Plug and Play**"-system er nemt at bruge og kræver minimal basistræning for at kunne betjenes. Ideel til brug uden for sygehuset.

Med en kombination af den mest stille pumpe på markedet og et højt komfortniveau tilbyder dette system en meget fleksibel pakke med stort set ingen problemer for patientens komfort pga. den nemme opsætning, der kan leve op til hver enkelt patients kliniske behov. Samtidig reducerer dette væsentligt dekontaminering og logistiske omkostninger.


Det HF-svejsede ydre cover i 'Dartex'-materiale kan strækkes i flere retninger, har en fantastisk gennemtrængelighed og lang levetid, samtidig med at det lever op til de strengeste krav til infektionskontrol.

Hybrid



1. Designet og produceret i Storbritannien
2. 5-års udvidet garanti *
3. Bruges til patienter med "meget høj risiko"
4. Dual Cell-teknologi
5. Max. patientvægt på 250kg
6. Ubegrænset teknisk support **

Dual Cell Hybrid-luftceller

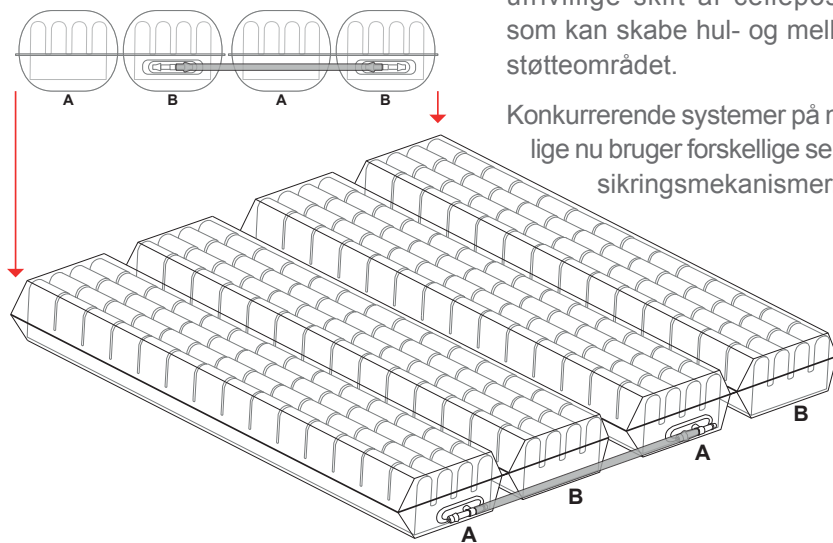

Vores holistiske tilgang har resulteret i udviklingen af "Dual Cell"-teknologi, som leverer yderligere stabilitet, og som forebygger "celle-vridning" eller ufrivillige skift af cellepositionen, som kan skabe hul- og mellemrum i støtteområdet.

Konkurrerende systemer på markedet lige nu bruger forskellige sekundære sikringsmekanismer.

* For at kunne få 5-års garanti skal systemet serviceres af Gioco Ltd årligt.

** Teknisk support i løbet af produktets levetid med muligheder for opgradering er uden videre tilgængelig, såfremt der ikke er kompatibilitetsproblemer.

Hybrid G4 Pumpeenhed



1. Designet og produceret i Storbritannien
2. "Plug and Play"-Pumpeenhed
2. 5-års udvidet garanti *
4. Næsten lydløs i brug

* For at kunne få 5-års garanti skal systemet serviceres af Gioco Ltd årligt.

Hybrid



Nem i brug



"Plug and Play"-systemet er simpelt og nemt at bruge. Gioco Hybrid-madrassen er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, hvilket betyder, at selv uden en pumpe er systemet altid parat. Patienten kan lægges på madrassen, før pumpen sættes til, og tændes. Systemets standardindstilling er lavtryks-tilstand.

I tilfælde af fejl vil et omfattende integreret alarmsæt alarmere sundhedspersonalet/brugeren. Det ergonomiske design betyder, at der er minimal brugerkontrol/input, og kun et minimum af simpel oplæring, hvilket gør systemet ideelt til brug uden for sygehuset og i intensivmiljøer.


Komponenter i topkvalitet

Hos Gioco tror vi på, at den bedste måde at bygge et holdbart kvalitetsprodukt på er ved at bruge komponenter af den bedste kvalitet, der lever op til designinput og dermed kunne tilbyde en påtænkt løsning.

Systemet er designet in-house med maksimal kontrol over enhver fase i design- og produktionsprocessen. Alle komponenter, der er sprøjtetstøbt, er produceret in-house, ligesom de elektroniske og luftdistribuerende mekanismer, der benytter sig af et væld af erfaringer fra 40 år i branchen for medicinske apparater.


Enhver kan indsamle viden, men hos Gioco understøtter vi den viden med vores visdom - det gør os og vores produkter til noget helt særligt.

Hybrid Mattress

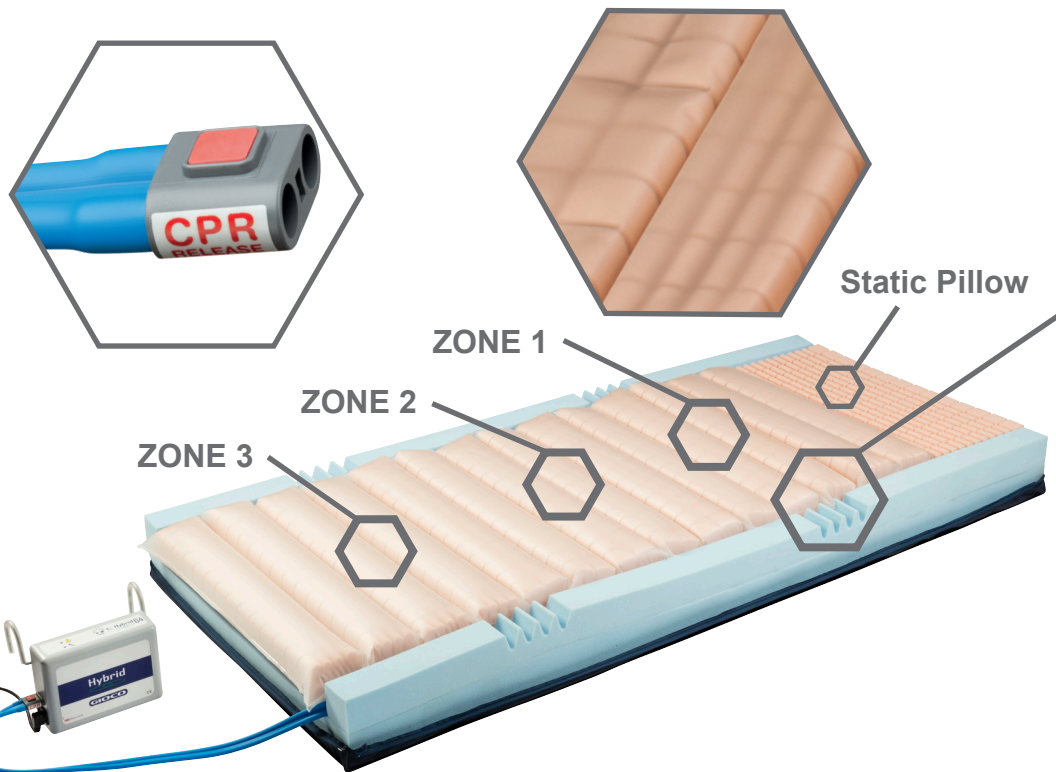

1. Designet og produceret i Storbritannien
2. Tre forskellige trykzoner
3. Hurtigt setup. Når trykniveauet på 2 minutter
4. Statisk eller dynamisk brug

Hybrid

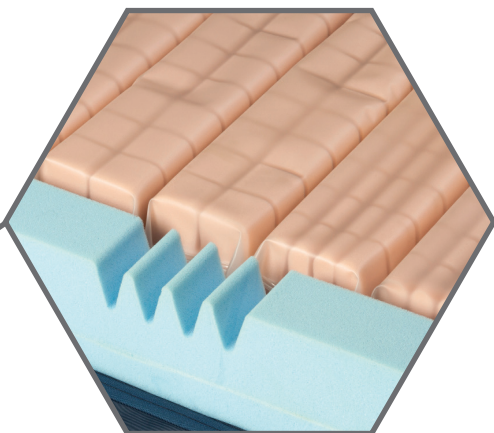

- 7 luftcellepar
- Dartex Top Sheet
- Konkave luftceller
- Sikringsafbrydere i sidevæggene
- 250kg Patientvægt
- Hurtig deflation ved genoplivning
- Tildækket luftrør



Static Care Comfort Controller



1. Designet og produceret i Storbritannien
2. Intet behov for strømkilde
3. Ingen løbende omkostninger
4. Lydløs i brug

Hybrid



Statisk system med tilpasning

Der er "Static", og så er der "Static Comfort". Mød Giocos nyeste produkt på markedet, der byder på tilpasset statisk madraspleje for brugertilpasset komfort.

Ingen strømkilde (batteri eller el) er nødvendig. En smart integreret luftreguleringsmekanisme, der gør det muligt for brugeren at tilpasse komforten til hver enkelt patient eller forløb i plejeperioden.

Static Care Comfort Controller sættes nemt på luftkontakten fra **Hybrid-** eller **Bariatric Hybrid-**madrasserne og regulerer dermed lufttrykket i luftcellerne.

Trykket i luftcellerne kan reguleres fra 10mmHg til 30mmHg.

Dette system forstærker præstationsevnerne fra den normale Hybrid-madras uden kompleksiteten eller irritationen, der nogle gange er forbundet med dynamiske systemer.

Static Care Comfort-systemet har **ingen løbende omkostninger** og er 100% driftssikker, da der ikke er bevægelige dele i systemet.

Bruger-overblik

Sæt madrasslangen til kontrolkassen.

Sæt kontrolknappen til den ønskede position (Niveau 1-3)

Læg patienten i sengen.

Systemet regulerer automatisk luftcelletrykket.

Systemet genstarter, hver gang patienten går til og fra sengen.

Tekniske specifikationer

Hybrid pumpeenhed

Serienummer.....	Ses på etiketten på bagsiden af pumpen
Strømforsyning.....	220 – 240 volt, 50 Hz
Strømforbrug.....	10 watts
Sikringer.....	TA1H 250V
Stødbeskyttelse.....	Klasse 2
Støjniveau.....	Ca. 25 dB
Tidscyklus.....	12 minutter
Cyklustype.....	1 ud af 2
Trykniveauer.....	Lo 18mmHg Hi 28mmHg
Dimensioner.....	265 x 175 x 90 mm
Weight.....	1,6 kg
Serviceinterval.....	12 måneder / 8760 timer
Forventet levetid.....	5 år
Delenes lagerholdbarhed.....	5 år

Static Care Comfort Controller

Serienummer.....	Ses på etiketten på bagsiden af kassen
Strømforsyning.....	ikke nødvendig
Strømforbrug.....	0 watts
Sikringer.....	Ingen
Stødbeskyttelse.....	ikke nødvendig
Støjniveau.....	Ca. 5 dB
Dimensioner.....	265 x 175 x 90 mm
Vægt.....	0,8kg
Serviceinterval.....	12 måneder / 8760 timer
Forventet levetid.....	5 år
Delenes lagerholdbarhed.....	5 år

Hybrid



Hybrid Mattress

Serienummer.....	Etiket på madrassens lufttrør
Antal luftceller.....	14 luftceller (7 par)
Luftcellemateriale.....	300um PU-film
Pudedel.....	Static Pressure Relief-skum
"U"-skumunderlag.....	75mm
Dimensioner.....	1990 x 900 x 100mm (Nominel)
Vægt.....	14kg
Top Cover-materiale.....	Dartex Performance 602
Madrascellernes forventede levetid.....	5 år
Madrasdelenes lagerholdbarhed.....	5 år

Hybrid Patientprofil

Static Foam System

Max. Patientvægt.....	159 kg
Patientens risikoniveau.....	Patienter med middel risiko

Static Care Comfort System

Max. Patientvægt.....	190 kg
Patientens risikoniveau.....	Patienter med høj risiko

Hybrid Pump System

Max. Patientvægt.....	250 kg
Patientens risikoniveau.....	Patienter med meget høj risiko

GIOCO Ltd.

310-312 Dallow Road
Luton, Bedfordshire,
LU1 1TD, England.

Web: www.mjsgrp.com

E-mail: sales@mjsgrp.com

Tlf.: +44 (0)1582 344 970

