

GIOCO



Hybrid Pressure Relief

CE



Système Hybrid



Le système Gio-Form Hybrid est un système de remplacement de matelas alternatif dynamique qui combine les avantages de la technologie moderne de la mousse et des matelas pneumatiques dynamiques traditionnels.

La conception est destinée aux patients considérés comme étant à '**très haut risque**' de développer un escarre.

Ce système '**Plug and Play**' est très simple à utiliser et ne nécessite qu'une formation de base pour le faire fonctionner. Il est parfait pour la collectivité.

En tant que combinaison entre la pompe la plus silencieuse du marché et de très haut niveaux de confort, ce système propose un ensemble très souple avec peu ou pas de perturbation du confort du patient grâce à une mise en œuvre simple afin de répondre aux besoins cliniques spécifiques à chaque patient. En retour, cela réduit considérablement les coûts de décontamination et de logistique.

Le matériau de revêtement extérieur « Dartex » soudé par HF s'étire dans plusieurs directions, a d'excellentes propriétés de perméabilité et une longue durée de vie tout en répondant aux exigences strictes de contrôle des infections.

Hybrid




1. Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
2. 5 ans de garantie *
3. Utilisation avec des patients à « très haut risque »
4. Technologie Dual Cell
5. Poids maximum du patient de 250 kg
6. Assistance technique illimitée **

Alvéoles hybrides Dual Cell

Notre approche holistique de conception a eu comme résultat de développer la technologie « Dual Cell » qui fournit une stabilité supplémentaire et évite la « torsion des alvéoles » ou un déplacement involontaire de la position des alvéoles qui crée des vides ou des écarts à l'intérieur de la zone de support.

Des systèmes concurrents actuellement disponibles sur le marché utilisent différents mécanismes de fixation secondaires.

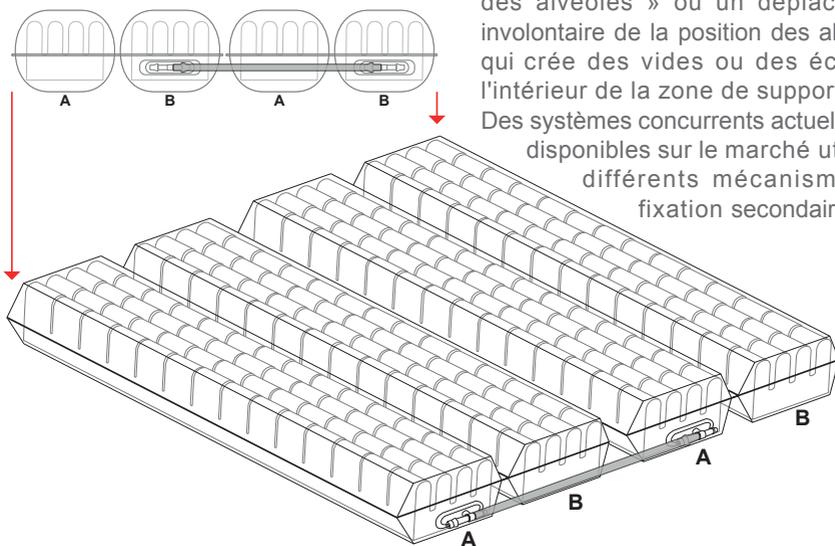

*Pour pouvoir bénéficier de la garantie de 5 ans, le système doit être entretenu une fois par an par Gioco Ltd.

** Une assistance technique tout au long de la vie du produit avec des options de mise à niveau est facilement disponible tant qu'il n'y a pas de problèmes de compatibilité.

Pompe Hybrid G4



1. Conçue et fabriquée au Royaume-Uni
2. Pompe « Plug and Play »
2. 5 ans d'extension de garantie *
4. Fonctionnement pratiquement silencieux

* Pour pouvoir bénéficier de la garantie de 5 ans, le système doit être entretenu une fois par an par Gioco Ltd.

Hybrid



Facilité d'utilisation



Le système « **Plug and Play** » est simple et facile à utiliser. Le matelas Gioco Hybrid a été conçu et fabriqué en utilisant des matériaux de grande qualité. Même sans pompe, le système est toujours prêt. Un patient peut être posé sur le matelas avant de brancher la pompe et de l'allumer. Le système adopte le mode basse pression par défaut.

En cas de problème, un ensemble complet d'alarmes alerte le personnel infirmier ou l'opérateur. L'ergonomie de la conception utilisée permet de minimiser le contrôle et les entrées de l'opérateur et de ne dispenser qu'une formation minimale (et de base), ce qui rend le système idéal pour la collectivité et les unités de soins intensifs.


Composants de très grande qualité

Chez Gioco, nous croyons que la meilleure façon de fabriquer un produit durable et de qualité est d'utiliser des composants de qualité pour répondre aux besoins de conception, proposant ainsi une solution attendue.

Le système a été conçu en interne avec un contrôle maximal de chaque étape du processus de conception et de fabrication. Tous les composants moulés par injection sont usinés et fabriqués en interne, ainsi que les mécanismes électroniques et de distribution d'air grâce à une riche expérience accumulée sur plus de 40 ans avec l'industrie médicale.


Tout le monde peut accumuler des connaissances, mais chez Gioco, nous confortons cette connaissance avec notre sagesse, qui nous distingue ainsi que nos produits.

Matelas hybride

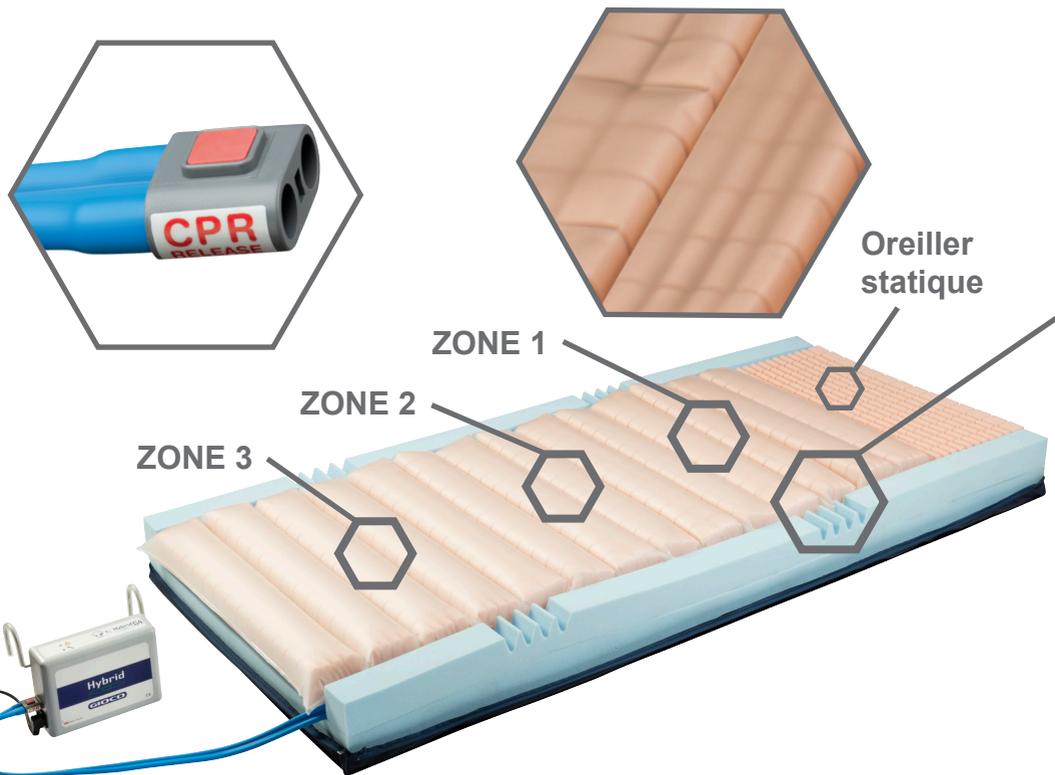

1. Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
2. Trois zones de pression différentes
3. Rapide configuration. Atteint la pression souhaitée en 2 minutes
4. Fonctionnement statique et dynamique

Hybrid

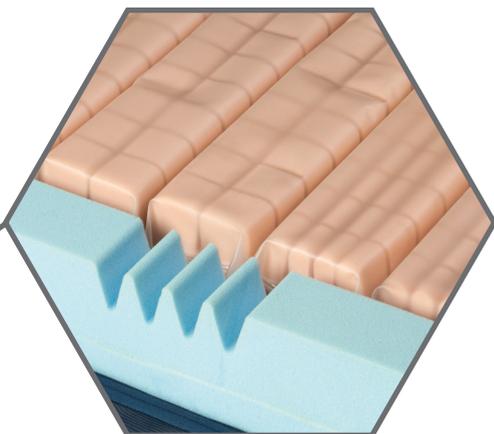

- 7 paires d'alvéoles
- Couverture supérieure Dartex
- Alvéoles concaves
- Découpes dans les parois latérales
- Poids du patient : 250 kg
- Rapide dégonflage en cas de RCP
- Tuyau d'air recouvert



Contrôleur du Static Care Comfort



1. Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
2. Aucune source d'alimentation électrique nécessaire
3. Aucun coûts de fonctionnement
4. Fonctionnement silencieux

Hybrid



Système statique avec réglage

Il y a le « Static », puis il y a le « Static Comfort ». Découvrez le dernier produit Gioco du marché qui propose un matelas pour les soins ajustable et statique pour un confort personnalisé.

Aucune source d'alimentation électrique (pile ou secteur) n'est nécessaire. Un mécanisme intelligent de régulation intégral de l'air qui permet à l'opérateur de personnaliser le confort adapté à chaque patient ou étape pendant la période de convalescence ou de soins.

Le contrôleur du Static Care Comfort se branche simplement dans la sortie d'air des matelas **Hybrid** ou **Bariatric Hybrid**, puis régule la pression de l'air dans les alvéoles.

La pression dans les alvéoles peut être réglée entre 10 mmHg et 30 mmHg.

Ce système améliore la performance du matelas Hybrid standard sans la complexité ou les irritations parfois associées aux systèmes dynamiques.

Le système Static Care Comfort n'engendre **aucun coût de fonctionnement** et est fiable à 100 %, car il n'y a pas de pièces en mouvement à l'intérieur du système.

Présentation pour l'utilisateur

Branchez le tuyau du matelas dans la boîte de commande.

Réglez le bouton de commande sur la position souhaitée (niveau 1-3)

Placez le patient sur le lit.

Le système régule automatiquement la pression des alvéoles.

Le système se réinitialise chaque fois que patient s'allonge sur le lit et sort du lit.

Spécifications techniques

Pompe Hybrid

Numéro de série.....	Indiqué sur l'étiquette au dos de la pompe
Alimentation électrique.....	220 – 240 volt, 50 Hz
Consommation électrique.....	10 watts
Fusibles.....	TA1H 250 V
Protection contre les chocs.....	Class 2
Niveau acoustique.....	Env. 25 dB
Durée du cycle.....	12 minutes
Type de cycle.....	1 en 2
Niveaux de pression.....	Faible 18mm Hg Élevée 28mm Hg
Dimensions.....	265 x 175 x 90 mm
Poids.....	1,6 kg
Intervalle entre 2 entretiens.....	12 mois / 8760 heures
Durée de vie prévue.....	5 ans
Durée de vie des pièces.....	5 ans

Contrôleur du Static Care Comfort

Numéro de série.....	Indiqué sur l'étiquette au dos de la pompe
Alimentation électrique.....	Non exigé
Consommation électrique.....	0 watt
Fusibles.....	Aucun
Protection contre les chocs.....	NA
Niveau acoustique.....	Env. 5 dB
Dimensions.....	265 x 175 x 90 mm
Poids.....	0,8 kg
Intervalle entre 2 entretiens.....	12 mois / 8760 heures
Durée de vie prévue.....	5 ans
Durée de vie des pièces.....	5 ans

Hybrid



Matelas Hybrid

Numéro de série.....	Indiqué sur l'étiquette du tube d'air du matelas
Nombre d'alvéoles.....	14 alvéoles (7 paires)
Matériau des alvéoles.....	Film PU 300 um
Oreiller.....	Mousse pour soulagement de la pression statique
Noyau en mousse « U ».....	75 mm
Dimensions.....	1990 x 900 x 150 mm (nominal)
Poids.....	14 kg
Matériaux du revêtement.....	Dartex Performance 602
Durée de vie prévue des alvéoles du matelas.....	5 ans
Durée de vie des pièces du matelas.....	5 ans

Profil d'un patient de Hybrid

Systeme de mousse statique

Poids Poids du patient.....	159 kg
Niveau de risque du patient.....	Patients à risques moyens

Systeme Static Care Comfort

Poids Poids du patient.....	190 kg
Niveau de risque du patient.....	Patients à risques élevés

Systeme Hybrid

Poids Poids du patient.....	250 kg
Niveau de risque du patient.....	Patients à risques très élevés

GIOCO Ltd.

310-312 Dallow Road
Luton, Bedfordshire,
LU1 1TD, Angleterre.

IW. www.mjsgrp.com
E. sales@mjsgrp.com
T. +44 (0)1582 344 970

